

DADOS TÉCNICOS DA SÉRIE ISO 520 DA MCA® DISPOSITIVO DE ISOLAMENTO «TUDO EM UM» / GRANDE

Fabricação	A Belgian - Swiss Cooperation	Sim	
	Aprovado pela CE - ISO 9001 - ISO 14001 - Classe de Segurança 1	Sim	
Dispositivo	Caixa	Alumínio, epóxi branco RAL 9010 com tratamento anti-bacteriano	Sim
	Dimensões	54 x 54 x 27 cm (l x a x c)	Sim
	Peso	19 kg (cartucho de filtragem incluído)	Sim
	Energia elétrica	220 - 240 V / 50 - 60 Hz / 8 a 175 Watt	Sim
	Instalação	Montagem na parede ou no teto - ligação a um sistema de ventilação existente é possível	Sim
	Operação	Controle remoto com chave (somente os funcionários do hospital operam o aparelho)	Sim
		4 velocidades - «modo silencioso» noturno para pacientes	Sim
	Comandos	Controle remoto com 4 níveis operacionais	Sim
	Capacidade de ar limpo	De 70 m³ até 1000 m³/ hora	Sim
	Capacidade de Área	Construído para áreas até aprox. 40 m² / 120 m³ - quartos de pacientes, TO, UTIs	Sim
	Segurança	Fluxo de ar numa só direção (quando não se encontra em funcionamento, não há possibilidade de fluxo reverso de ar!)	Sim
	Manutenção	Nenhuma	Sim
	Garantia	36 meses (excl. Cartucho do filtro) - com contrato de manutenção do filtro	Sim
Cartucho do filtro		Qualidade ULPA 15 (7,8 m²): 99,9995 % em 0.1 a 0.3 µm!, testado EN1822 Os filtros MedicCleanAir são testados até 0.017 µm!	Sim
Extra		Controle remoto com mostrador permanente de pressão diferencial (Pa) (diferença entre o quarto do paciente e a área circundante = certeza que o quarto se encontra sob pressão diferencial) Alarme de segurança integrado para o caso de a pressão diferencial baixar permanentemente após 60 segundos Recursos automáticos integrados para manter a diferença de pressão necessária pré-instalada	Opt
		Pré-filtragem F5 adicional no exterior do dispositivo deverá ser renovada a cada substituição de paciente (quando o paciente deixa o hospital - o quarto é desinfetado - o pré-filtro deverá ser renovado)	Opt
Opcional	Cartucho do filtro	Em vez do ULPA 15, o cliente poderá optar por um Sistema combinado de 3 pré-filtros F7 + carvão ativado + Hepa 14	Opt
	Sistema 1	Pré-filtro para pó fino, Classe F7 - SN EN 779 (0,5 m²)	
	Sistema 2	Carvão ativado não impregnado - produto natural	
	Sistema 3	HEPA, Classe H14 - SN EN 1822 - (2,5 m²)	
		Testado anti-vazamento individualmente	
	Caixa	Em vez de acabamento anti-bacteriano em epóxi branco, cobertura em aço inoxidável	Opt
	Proteção anti-incêndio	Compatível com grelhas resistentes ao fogo ou corta-fogos circulares 30' ou 60' para impedir o fogo de se espalhar para outras áreas	Opt
Geral		Controle de infecções - caixa em epóxi branco ou em aço inoxidável garante uma limpeza fácil graças ao pré-filtro substituível.	Sim
		Instalação rápida: ½ dia de trabalho	Sim
		O consumível é o cartucho de filtragem, que deverá ser mudado todos os anos (após o primeiro ano de utilização)	Sim
		Segurança permanente de circulação de ar graças à garantia de circulação do ar num só sentido! (não há risco de contaminação por fluxo reverso de ar)	Sim
		O pré-filtro garante maior duração do filtro Ulpa ou Hepa	Opt
		Segurança permanente sobre pressão diferencial incluindo opções automáticas	Opt

MedicCleanAir®, V09-2018 / Sim = standard, Opt. = opcional / Technical changes permitted without notice

Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

info@mediccleanair.com

www.mediccleanair.com

Division Walsberghe nv
Bredestraat 13
2000 Antwerp / Belgium

MedicCleanAir®

A BELGIAN - SWISS COOPERATION



Aparelho Standard ISO 520 para montagem na parede ou teto - vista principal com unidade de filtragem e conexões por cabo



Aparelho Standard ISO 520 para montagem na parede ou teto - vista principal com unidade de filtragem, conexões por cabo e ligação especial para tubo



Controle remoto padrão operado com chave, com níveis: 0 - 1 - 2 - 3 - 4



Controle remoto com chave e tela de pressão diferencial, cabo com tomadas de ligação, manual de instruções sucinto para funcionários do hospital (enfermeiros chefe, departamento técnico, etc.)




Pré-filtragem adicional instalada na parte exterior da unidade



Cartucho de filtragem ULPA 15



Detalhe do filtro do cartucho de filtragem ULPA 15

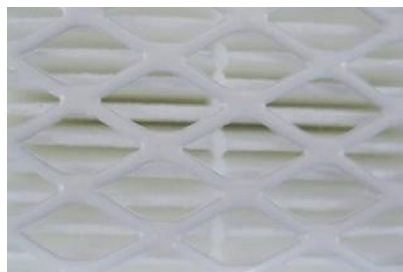

Detalhe do filtro do cartucho de filtragem ULPA 15: proteção do filtro através de grelha.

SIMPLESMENTE O MELHOR DO MERCADO!



Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

info@mediccleanair.com

www.mediccleanair.com

Division Walsberghe nv
Bredestraat 13
2000 Antwerp / Belgium