

MCA® ISO 120
TECRIT ÜNİTESİ

TEKNİK VERİLER

Üretim	Bir Belçika - İsviçre İşbirliği	Evet	
	CE onaylı - ISO 9001 - ISO 14001 - Güvenlik Sınıfı 1	Evet	
Ünite	Kasa	Beyaz epoksi RAL 9010, anti-bakteriyel standart (veya opsiyonel paslanmaz çelik)	Evet
	Büyükölçü	35 x 35 x 25 cm (g x y x d)	Evet
	Ağırlık	15 kg (filtre kartuşu dahil)	Evet
	Elektrik	220 - 240 V / 50 - 60 Hz / 35 ila 80 Watts	Evet
	Kurulum	Duvara veya tavana montaj - mevcut havalandırma sistemine bağlantı mümkün	Evet
	Çalıştırma	Anahtarlı uzaktan kumanda (sistemi yalnız hastane personeli çalıştırabilir)	Evet
		4 hız seviyesi - hastalar için sessiz «gece seviyesi»	Evet
	Kontroller	4 kullanım seviyeli uzaktan kumanda	Evet
	Temiz hava kapasitesi	70 m³ ila 135 m³ / saat	Evet
	Alan kapasitesi	Yaklaşık en fazla 15 m² / 40 m³ alan için üretilmiştir - hasta odaları, ameliyathane, Yoğun Bakım Üniteleri	Evet
	Güvenlik	Tek yönlü hava akışı (çalışmadığında hava akışı ters döndürülemez!)	Evet
	Bakım	Yok	Evet
	Garanti	Filtre bakım sözleşmesiyle 36 ay (Filtre kartuşu hariç)	Evet
Filtre Kartuşu		ULPA 15 Kalitesi (3.7 m²): 0,1 ila 0.3 µm'de %99,9995!! , EN1822 testi yapılmıştır MedicCleanAir filtreleri 0,017 µm'ye kadar test edilmiştir!	Evet
Ekstra		Kalıcı basınç (Pa) farkı (hasta odası ile komşu alan arasındaki fark = söz konusu odada basınç farkı olduğu güvencesi) ekranı ile uzaktan kumanda Basınç farkının 60 saniyenin ardından kalıcı olarak düşme olasılığına karşılık entegre güvenlik alarmı Önceden takılan gerekli basınç farkını korumak için entegre otomatik özellikler	Ops
		Ünitenin dış tarafındaki ilave F5 ön filtreleme, hastanın her değişiminde değiştirilecektir (hasta değiştiğinde - oda dezenfekte edilir - ön filtre de değiştirilebilir)	Ops
		Mevcut veya yeni havalandırma borularına bağlanmak üzere özel adaptör (seri 120)	Ops
Opsiyonel	Filtre kartuşu	ULPA 15 yerine aşağıdaki seçilebilir: Kombine 3 filtre sistemi ön filtre F7 + aktif karbon + HEPA 14	Ops
	Sistem 1	İnce toz ön filtresi, Sınıf F7 - SN EN 779 (0,5 m²)	
	Sistem 2	Aktif Karbon emdirilmemiş - doğal ürün	
	Sistem 3	HEPA, Sınıf H14 - SN EN 1822 - (2,5 m²)	
		Ayrı olarak kaçak testi yapılmıştır	
	Kasa	Beyaz epoksi anti-bakteriyel kaplama yerine, Paslanmaz Çelik kasa	Ops
	Yangın Koruması	Yangının diğer alanlara yayılmasını önlemek için yangına dayanıklı ızgaralar veya dairesel yangın sönmüleyici kartuşlar 30' veya 60' ile uyumludur	Ops
Genel		Enfeksiyon kontrolü dostu - epoksi beyaz anti-bakteriyel veya paslanmaz çelik kasa kolay temizlik sağlar ve değiştirilebilir ön filtre sayesinde kullanıcı dostudur.	Evet
		Hızlı kurulum, yalnız ½ günlük iş	Evet
		Tek kullanımlık filtre kartuşu her yıl değiştirilmelidir (12 ayın ardından)	Evet
		Tek yönlü hava akışı ile kalıcı hava akışı güvenliği garantidir! (ters hava akışından dolayı kontaminasyonun geriye üflenme riski yoktur)	Evet
		Ön filtre Ulpa veya Hepa filtre için daha uzun kullanım ömrü sunar	Evet
		Otomatik özellikler dahil basınç farkında kalıcı güvenlik	Ops

MedicCleanAir®, V09-2018 / Evet = standart, Ops = opsiyonel / Technical changes permitted without notice

Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

www.mediccleanair.com

info@mediccleanair.com

Division Walsberghe nv
Bredestraat 13
2000 Antwerp / Belgium

MedicCleanAir®

A BELGIAN - SWISS COOPERATION



Duvara veya tavana montaj için standart ISO 100 Cihazı - filtre ünitesi ve kablo bağlantıları ile ana görünüm



Duvara veya tavana montaj için standart ISO 120 Cihazı - filtre ünitesi, kablo bağlantıları ve özel boru bağlantısı ile ana görünüm



Anahtar konumları 0 - 1 - 2 - 3 - 4 ile çalıştırılan Standart Uzaktan Kumanda




Kalıcı basınç farkı ekranı ile anahtarlı Uzaktan Kumanda, bağlantı fişleri olan kablo, hastane personeli için kısa talimat kılavuzu (baş hemşireler, teknik bölüm, vs.)




Filtre ünitesinin dışındaki ilave ön filtreleme



Filtre kartuşu ULPA 15

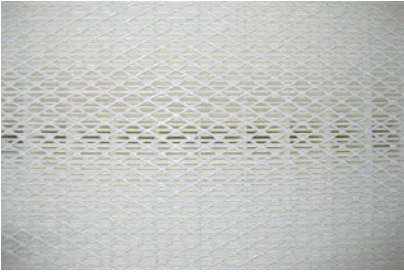

ULPA 15 filtre kartuşunun filtre ayrıntıları

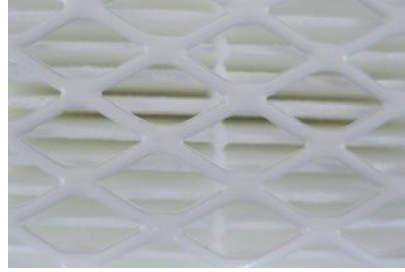

ULPA 15 filtre kartuşunun filtre ayrıntıları: filtre ortamının ızgarayla beraber korunma- sı.

KISACASI EN İYİSİ!



Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

info@mediccleanair.com

www.mediccleanair.com

Division Walsberghe nv
Bredestraat 13
2000 Antwerp / Belgium