

MCA® ISO 210 2 PARÇALI TECRIT ÜNİTELERİ

TEKNİK VERİLER

Üretim	Bir Belçika - İsviçre İşbirliği	Evet	
	CE onaylı - ISO 9001 - ISO 14001 - Güvenlik Sınıfı 1	Evet	
Ünite	Kasa	Beyaz epoksi RAL 9010 anti-bakteriyel	Evet
	Büyükklük	32 x 43 x 14 cm (g x y x d) + 32 x 42 x 12 cm (g x y x d)	Evet
	Ağırlık	4,7 (filtre ünitesi) + 2,4 (fan ünitesi) = 7,1 kg filtre kartuşu dahil	Evet
	Elektrik	220 - 240 V / 50 - 60 Hz / 35 ila 80 Watts	Evet
	Kurulum	Duvara - kolay montaj - yalnız ½ günlük iş	Evet
		Filtre ve vantilatör ünitesi arasında hava sızdırmayan bağlantı üzerinde %100 güvenlik	Evet
	Çalıştırma	Anahtarlı uzaktan kumanda (sistemi yalnız hastane personeli çalıştırabilir)	Evet
		4 hız seviyesi - hastalar için sessiz «gece seviyesi»	Evet
	Kontroller	4 işletme seviyesi içeren Uzaktan Kumanda ve ünite LED ekran	Evet
		Temiz hava kapasitesi 70 m ³ ila 135 m ³ / saat	Evet
	Alan kapasitesi	Yaklaşık en fazla 15 m ² / 40 m ³ alan için üretilmiştir - hasta odaları, ameliyathane, Yoğun Bakım Üniteleri	Evet
	Güvenlik	Tek yönlü hava akışı (çalışmadığında hava akışı ters döndürülemez!)	Evet
	Bakım	Yok	Evet
	Garanti	36 ay (Filtre kartuşu hariç)	Evet
Filtre Kartuşu		ULPA 15 Kalitesi (3.7 m ²): 0,1 ila 0.3 µm'de %99,9995!., EN1822 testi yapılmıştır MedicCleanAir filtreleri 0,017 µm'ye kadar test edilmiştir!	Evet
		Filtre ünitesinde filtre kontrolü LED ekranı (yeşil-sarı-kırmızı)	Evet
Ekstra		Kalıcı basınç (Pa) farkı (hasta odası ile komşu alan arasındaki fark = söz konusu odada basınç farkı olduğu güvencesi) ekranı ile uzaktan kumanda Basınç farkının 60 saniyenin ardından kalıcı olarak düşme olasılığına karşılık entegre güvenlik alarmı Önceden takılan gerekli basınç farkını korumak için entegre otomatik özellikler	Ops
		Ünitenin dış tarafındaki ilave F5 ön filtreleme, hastanın her değişiminde değiştirilecektir (hasta değiştiğinde - odalar dezenfekte edilir - ön filtre de değiştirilebilir)	Ops
Opsiyonel	Filtre kartuşu	ULPA 15 yerine aşağıdaki seçilebilir: Kombine 3 filtre sistemi ön filtre F7 + aktif karbon + HEPA 14	Ops
	Sistem 1	İnce toz ön filtresi, Sınıf F7 - SN EN 779 (0,5 m ²)	
	Sistem 2	Aktif Karbon emdirilmemiş - doğal ürün	
	Sistem 3	HEPA, Sınıf H14 - SN EN 1822 - (2,5 m ²)	
		Ayrı olarak kaçak testi yapılmıştır	
	Kasa	Beyaz epoksi anti-bakteriyel kaplama yerine, Paslanmaz Çelik kasa	Ops
	Yangın Koruması	Yangının yayılmasını önleyecek yangına dayanıklı ızgaralar veya dairesel yangın sönmüleyici kartuşlar 30' veya 60' ile uyumludur (yalnız duvara montaj edilen cihazda)	Ops
Genel		Enfeksiyon kontrolü dostu - epoksi beyaz anti-bakteriyel veya paslanmaz çelik kasa kolay temizlik sağlar ve değiştirilebilir ön filtre sayesinde kullanıcı dostudur.	Evet
		Hızlı kurulum, yalnız ½ günlük iş	Evet
		Tek kullanımlık filtre kartuşu her yıl değiştirilmelidir (12 ayın ardından)	Evet
		Filtre ve havalandırma ünitesi arasında hava sızdırmayan bağlantı üzerinde %100 güvenlik	Evet
		Tek yönlü hava akışı ile kalıcı hava akışı güvenliği garantidir! (ters hava akışından dolayı kontaminasyonun geriye üflenme riski yoktur)	Evet
		Ön filtre ULPA veya HEPA filtre için daha uzun kullanın ömrü sunar	Evet
		Otomatik özellikler dahil basınç farkında kalıcı güvenlik	Ops

MedicCleanAir®, V09-2018 / Evet = standart, Ops = opsiyonel / Technical changes permitted without notice

Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

www.mediccleanair.com

info@mediccleanair.com

Division Walsberghe nv
Bredestraat 13
2000 Antwerp / Belgium

MedicCleanAir®

A BELGIAN - SWISS COOPERATION



Duvara montaj için standart ISO 210 Cihaz - filtre ünitesi (ULPA 15 seviyesi) ve LED ekranı (0-1-2-3-otomatik + filtre kontrolü) içeren önden görünüm



Filtre- ve vantilatör ünitesi - boru bağlantı- ları ve kablo bağlantılarını içeren arkadan görünüm



Anahtar konumları 0 - 1 - 2 - 3 - 4 ile çalıştırılan Standart Uzaktan Kumanda



Kalıcı basınç farkı ekranı ile anahtarlı Uzaktan Kumanda, bağlantı fişleri olan kablo, hastane personeli için kısa talimat kılavuzu (baş hemşireler, teknik bölüm, vs.)



Filtre ünitesinin dışındaki ilave ön filtreleme



Filtre kartuşu ULPA 15




Basınç farkı sensörü, RC bağlantısı, PC bağlantısı ve elektrik fişi, çalışma LED'i+filtre kontrolünün açık görünümünü içeren filtre ünitesi ayrıntıları



Kablo bağlantıları, basınç farkı boruları, ek yerleri, montaj civataları ile filtre ve vantilatör ünitesinin her iki arka tarafının açık görünümünü içeren ISO 200 Cihaz pencere montaj grubu



ULPA 15 filtre kartuşunun filtre ayrıntıları

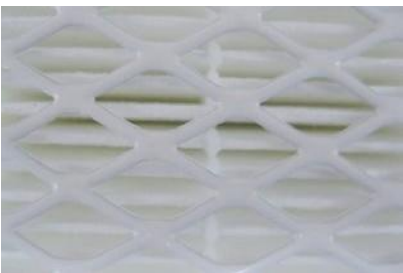

ULPA 15 filtre kartuşunun filtre ayrıntıları: filtre ortamının ızgarayla beraber korunması.



Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

www.mediccleanair.com

info@mediccleanair.com

Division Walsberghe nv
Bredestraat 13
2000 Antwerp / Belgium