

MCA® ISO 520 SERISI
«HEPSİ BİR ARADA» TECRIT ÜNİTESİ / BÜYÜK

TEKNİK VERİLER

| | | | |
|----------------|--|---|------|
| Üretim | Bir Belçika - İsviçre İşbirliği | Evet | |
| | CE onaylı - ISO 9001 - ISO 14001 - Güvenlik Sınıfı 1 | Evet | |
| Ünite | Kasa | Alüminyum, beyaz epoksi RAL 9010, anti-bakteriyel standart | Evet |
| | Büyükklük | 54 x 54 x 27 cm (g x y x d) | Evet |
| | Ağırlık | 19 kg (filtre kartuşu dahil) | Evet |
| | Elektrik | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz / 8 ila 175 Watts | Evet |
| | Kurulum | Duvara veya tavana montaj - mevcut havalandırma sistemine bağlantı mümkün | Evet |
| | Çalıştırma | Anahtarlı uzaktan kumanda (sistemi yalnız hastane personeli çalıştırabilir) | Evet |
| | | 4 hız seviyesi - hastalar için sessiz «gece seviyesi» | Evet |
| | Kontroller | 4 kullanım seviyeli uzaktan kumanda | Evet |
| | Temiz hava kapasitesi | 70 m ³ ila 1000 m ³ / saat | Evet |
| | Alan kapasitesi | Yaklaşık en fazla 40 m ² / 120 m ³ alan için üretilmiştir - hasta odaları, ameliyathane, Yoğun Bakım Üniteleri | Evet |
| | Güvenlik | Tek yönlü hava akışı (çalışmadığında hava akışı ters döndürülemez!) | Evet |
| | Bakım | Yok | Evet |
| | Garanti | Filtre bakım sözleşmesiyle 36 ay (Filtre kartuşu hariç) | Evet |
| Filtre Kartuşu | | ULPA 15 Kalitesi (7,8 m ²): 0,1 ila 0,3 µm'de %99,9995!! , EN1822 testi yapılmıştır MedicCleanAir filtreleri 0,017 µm'ye kadar test edilmiştir! | Evet |
| Ekstra | | Kalıcı basınç (Pa) farkı (hasta odası ile komşu alan arasındaki fark = söz konusu odada basınç farkı olduğu güvencesi) ekranı ile uzaktan kumanda Basınç farkının 60 saniyenin ardından kalıcı olarak düşme olasılığına karşılık entegre güvenlik alarmı Önceden takılan gerekli basınç farkını korumak için entegre otomatik özellikler | Ops |
| | | Ünitenin dış tarafındaki ilave F5 ön filtreleme, hastanın her değişiminde değiştirilecektir (hasta değiştiğinde - oda dezenfekte edilir - ön filtre de değiştirilebilir) | Ops |
| Opsiyonel | Filtre kartuşu | ULPA 15 yerine aşağıdaki seçilebilir: Kombine 3 filtre sistemi ön filtre F7 + aktif karbon + Hepa 14 | Ops |
| | Sistem 1 | İnce toz ön filtresi, Sınıf F7 - SN EN 779 (0,5 m ²) | |
| | Sistem 2 | Aktif Karbon emdirilmemiş - doğal ürün | |
| | Sistem 3 | HEPA, Sınıf H14 - SN EN 1822 - (2,5 m ²) | |
| | | Ayrı olarak kaçak testi yapılmıştır | |
| | Kasa | Beyaz epoksi anti-bakteriyel kaplama yerine, Paslanmaz Çelik kasa | Ops |
| | Yangın Koruması | Yangının diğer alanlara yayılmasını önlemek için yangına dayanıklı ızgaralar veya dairesel yangın sönmüleyici kartuşlar 30' veya 60' ile uyumludur | Ops |
| Genel | | Enfeksiyon kontrolü dostu - epoksi beyaz anti-bakteriyel veya paslanmaz çelik kasa kolay temizlik sağlar ve değiştirilebilir ön filtre sayesinde kullanıcı dostudur. | Evet |
| | | Hızlı kurulum, yalnız ½ günlük iş | Evet |
| | | Tek kullanımlık filtre kartuşu her yıl değiştirilmelidir (12 ayın ardından) | Evet |
| | | Tek yönlü hava akışı ile kalıcı hava akışı güvenliği garantidir! (ters hava akışından dolayı kontaminasyonun geriye üflenme riski yoktur) | Evet |
| | | Ön filtre Ulpa veya Hepa filtre için daha uzun kullanım ömrü sunar | Ops |
| | | Otomatik özellikler dahil basınç farkında kalıcı güvenlik | Ops |

MedicCleanAir®, V09-2018 / Evet = standard, Ops = opsiyonel / Technical changes permitted without notice

Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

www.mediccleanair.com

info@mediccleanair.com

Division Walsberghe nv
Bredestraat 13
2000 Antwerp / Belgium

MedicCleanAir®

A BELGIAN - SWISS COOPERATION



Duvara veya tavana montaj için standart ISO 520 Cihazı - filtre ünitesi ve kablo bağlantıları ile ana görünüm



Duvara veya tavana montaj için standart ISO 520 Cihazı - filtre ünitesi, kablo bağlantıları ve özel boru bağlantısı ile ana görünüm



Anahtar konumları 0 - 1 - 2 - 3 - 4 ile çalıştırılan Standart Uzaktan Kumanda



Kalıcı basınç farkı ekranı ile anahtarlı Uzaktan Kumanda, bağlantı fişleri olan kablo, hastane personeli için kısa talimat kılavuzu (baş hemşireler, teknik bölüm, vs.)




Filtre ünitesinin dışındaki ilave ön filtreleme



Filtre kartuşu ULPA 15



ULPA 15 filtre kartuşunun filtre ayrıntıları

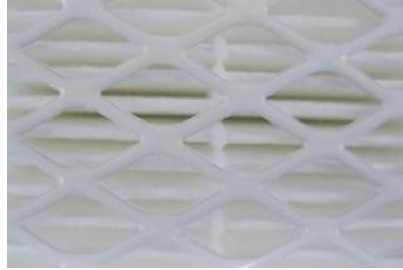

ULPA 15 filtre kartuşunun filtre ayrıntıları: filtre ortamının ızgarayla beraber korunması.



KISACASI EN İYİSİ!

Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

info@mediccleanair.com

www.mediccleanair.com

Division Walsberghe nv
Bredestraat 13
2000 Antwerp / Belgium